



YUNMAI Balance



Умные весы

Руководство пользователя

Пожалуйста прочитайте это руководство перед использованием и держите его под рукой для справок в будущем

Использование умных весов YUNMAI Balance

Спасибо, что выбрали умные весы YUNMAI Balance!

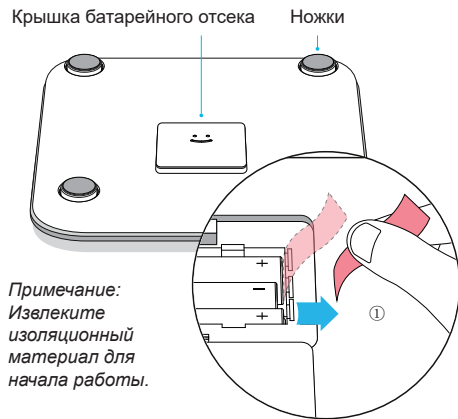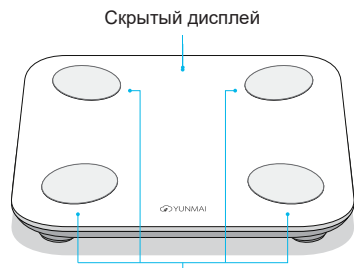

*Примечание:
Извлеките
изоляционный
материал для
начала работы.*

1. Установка приложения YUNMAI на смартфон


Найдите приложение "YUNMAI" в Google Play или App Store или просканируйте QR-код для загрузки и установки приложения. Сопряжение со смартфоном произойдет после включения весов.

Просканируйте QR код
Загрузите приложение YUNMAI




2. Сопряжение с весами по Bluetooth

Откройте приложение YUNMAI, подключите Bluetooth, подключение произойдет автоматически, а ваши данные в режиме реального времени синхронизируются с приложением.

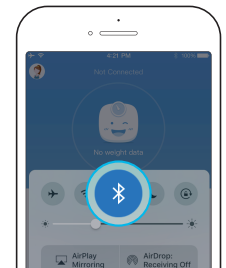


iOS: Проведите по экрану снизу вверх, чтобы открыть Центр Управления и нажмите на значок Bluetooth.

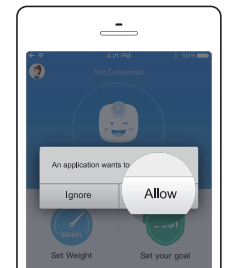


Android: После запуска приложения YUNMAI, система уведомит вас о подключении Bluetooth, нажмите на «Разрешить», чтобы установить соединение.

3. Начало использования


Убедитесь в правильности расположения ступней, как показано на рисунке ниже:

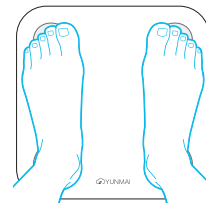


Правильно:
Ступни располагаются на всех 4 сенсорах

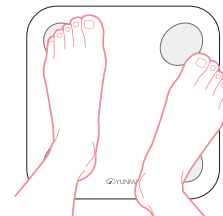

неправильно:
Заступ за край может спровоцировать неточность в измерениях

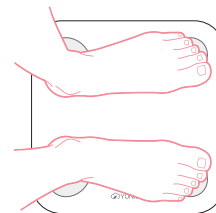


Неправильно:
Встаньте в правильном направлении, чтобы не перекрывать экран

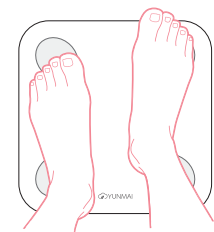

Неправильно:
Положение ног не на одной линии, что может спровоцировать неточности в измерениях

Примечание: для обеспечения точности измерений взвешиваться нужно босиком и в правильном положении.

Приложение YUNMAI

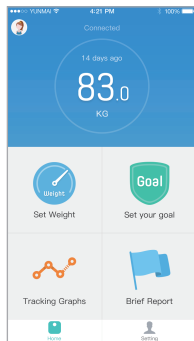

Используя Умные Весы YUNMAI Balance с приложением YUNMAI, Вы сможете записывать, анализировать и ставить цели для своего здоровья. YUNMAI сохраняет всю информацию, предоставляет краткий отчет о состоянии здоровья и рекомендации по его улучшению.

Примечание: Данная картинка представлена только в качестве примера. Для более подробной информации загрузите последнюю версию приложения YUNMAI.

Дисплей



Индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ/BMI (для мужчин и женщин)					
Возраст	Недовес	Норма	Избыточный вес	Ожирение	Патологическое ожирение
18-120	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9	≥ 35

Индекс массы тела (ИМТ) = вес (кг) / рост² (м)

Пример: ИМТ= 70 кг / (1,75*1,75) = 22,86 (Норма)

Примечание: ИМТ - это стандарт, который широко используется при оценке состояния здоровья человека.

Поддержка мобильных устройств

iOS 8.0 и выше

Android 4.3 и выше

Уход

Используйте влажную ткань для очистки весов. Не рекомендуется использовать чистящие средства или мыть весы под струей воды.

Меры предосторожности

Перед использованием умных весов YUNMAI, пожалуйста, убедитесь, что вы не беременны, не используете / не использовали кардиостимулятор, электрокардиографы или другие медицинские устройства перед взвешиванием с помощью умных весов YUNMAI. Не разбирайте, не надавливайте, не роняйте изделие, не помещайте под воду, огонь, не подвергайте воздействию температур выше 60°C (140° F).

Калибровка весов

Наступите и сойдите с весов быстро. Шкала должна показать «0.0», это означает, что калибровка завершена. Для повторной калибровки требуется 5 секунд, пожалуйста подождите некоторое время перед повторным взвешиванием.

Характеристики изделия

Наименование модели: Умные весы YUNMAI Balance

Модель: M1690

Единицы измерения: кг / фунт

Связь: Bluetooth 4.0

Размер: 260*260*26 мм

Действующий стандарт: Q/HSK 001-2016

Вес нетто: 1.3 кг

Диапазон взвешиваемого веса: 3-180 кг

Точность: +/- 50 г

Рабочая температура: -5 C - 40 C

Материал корпуса: пластик

Питание: батарейка AA 1,5 В * 3

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Подпись покупателя	
<i>С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен</i>	
Печать и подпись продавца	

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.ru и по телефону: 8-800-770-78-87.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Производитель: Shenzhen YUNMAI Technology Co., Ltd
Шеньжень Юнмай Текнолоджи Ко., Лтд
Адрес: Room 2201, Block B, Sunshine TDI Building, Nanshan District, Shenzhen 518000, China
Рум 2201, Блок Б, Саншайн ТДАЙ Билдинг, Наньшань Дистрикт, Шеньжень 518000, Китай